
# Compat Ella®

## *Kurzanleitung zur Installation*

Diese Kurzanleitung zur Installation zeigt die ersten Schritte, welche für die Erstbedienung der Compat Ella® benötigt werden und hilft, sich mit den Einstellungen und Parameter vertraut zu machen. Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen und Parameter gespeichert – und auch nachdem die Compat Ella® ausgeschaltet oder neu gestartet wurde – beibehalten werden.


## Erste Anwendung

### 1 Pumpe aufladen

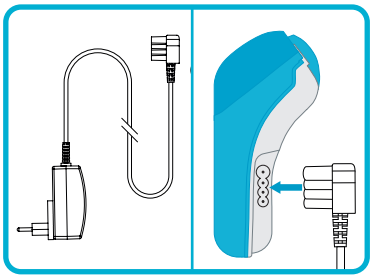


Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, die Pumpe mindestens 6 Stunden lang aufzuladen.

### 2 Pumpe einschalten

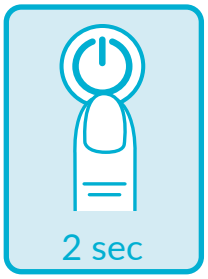



### 3 Datum und Uhrzeit einstellen

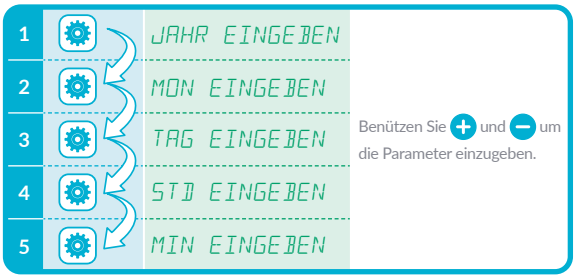


Damit die Pumpe diese Einstellungen speichern kann, ist es wichtig, dass sie bei der Erstanwendung mindestens 20 Minuten lang lädt.

### 4 Ändern der Spracheinstellung

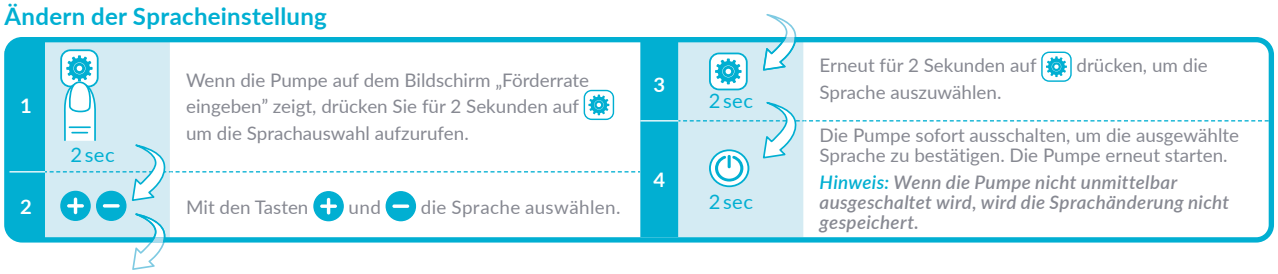


## Benutzereinstellungen

Durch Drücken auf können jederzeit Informationen überprüft und/oder die Pumpeneinstellungen gelöscht werden. Benützen Sie die Tasten + und − um die Einstellungen anzupassen. Eine Einstellung wird automatisch gespeichert.

| Taste | Display | Funktion |
|---|---|---|
| | LAUTSTAERKE | Stellt die Lautstärke des Alarmtons auf einen Wert zwischen 1 und 3 (3 = höchster Wert) ein. |
| | BELEUCHTUNG | Stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf einen Wert zwischen 1 und 3 (3 = höchster Wert) ein. |
| | DISPLAY DIMMEN? | Stellt das automatische Dimmen der Hintergrundbeleuchtung ein, wenn die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen wird.<br>JA: Der Bildschirm wird 10 Sekunden nach dem letzten Betätigen einer Taste gedimmt.<br>NEIN: Der Bildschirm bleibt dauerhaft beleuchtet (im Akkubetrieb nicht verfügbar). |
| | ALARM BEI ERREICHTEM ZIELVOLUMEN? | Stellt ein, ob die Pumpe den Anwender bei Applikationsende warnen soll.<br>JA: Die Pumpe gibt Alarm (Standardeinstellung).<br>NEIN: Die Pumpe gibt bei Applikationsende keinen Alarm. |
| | | Kehrt zurück zum Hauptbildschirm. |

*Entdecken Sie Compat Ella®*

## Erweiterte Einstellungen

**Warnhinweise:** Die Anpassung der folgenden Einstellungen sollte nur durch eine medizinische Fachkraft erfolgen.

Wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, ⏻ drücken und solange halten, bis die Meldung „2 SEC DRÜCKEN ZUM EINSCHALTEN“ erscheint. Jetzt zusätzlich ⚙ drücken und halten, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen. Auf ⚙ drücken, um durch die erweiterten Einstellungen zu blättern. Wenn die letzte Einstellung erreicht ist, kann durch Drücken von ⚙ zur ersten Einstellung zurück gesprungen werden. Mit den Tasten ⊕ und ⊖ Einstellungen anpassen. Eine Einstellung wird automatisch gespeichert.

| Schritt | Taste | Display | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | ⏻ + ⚙ | APPLIKATIONS-VORGABEN SPERREN?<br>NEIN<br>JA | Stellt die zuvor programmierten Applikationseinstellungen als Standardwert ein und verhindert, dass diese Einstellungen durch den Anwender verändert werden können.<br>NEIN: Entsperrt die Einstellungen der Nahrungsapplikation.<br>JA: Sperrt die Einstellungen der Nahrungsapplikation. |
| 2 | ⊕ | INTERVALLPROGRAMM ZULASSEN?<br>JA<br>NEIN | Aktiviert/deaktiviert die Verwendung des Intervallprogramms.<br>JA: Interval Mode is available to the user<br>NEIN: Interval Mode is NOT available to the user |
| | ⚙ | KOMMUNIKATION<br>AUS<br>RUF<br>PDMS | Aktiviert die Kommunikation mit dem Schwesternruf bzw. dem Patientendaten- Management-system (PDMS).<br>AUS: Keine Kommunikation.<br>RUF: Kommunikation mit dem Schwesternruf ist aktiviert.<br>PDMS: PDMS-Funktion ist aktiviert. |
| | ⚙ | JAHR EINGEBEN | Um das Jahr einzugeben. |
| | ⚙ | MON EINGEBEN | Um den Monat einzugeben. |
| | ⚙ | TAG EINGEBEN | Um den Tag einzugeben. |
| | ⚙ | STD EINGEBEN | Um die Stunden einzugeben. |
| | ⚙ | MIN EINGEBEN | Um die Minuten einzugeben. |
| | ⚙ | REV | Zeigt die Softwareversion der Pumpe an. |
| | ⚙ | SN | Zeigt die Seriennummer der Pumpe an. |
| | ⚙ | APPLIKATIONS-VORGABEN SPERREN? | Kehrt zurück zum Bildschirm APPLIKATIONS-VORGABEN SPERREN? |
| 3 | ⏻ | | Gerät ausschalten, um die Einstellungen zu speichern. |

Medizinprodukt der Klasse IIa (CE0123).
Dieses Dokument erstezt nicht die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Aussendienstmitarbeiter oder auf **www.compat.com**

®Sofern nicht anders angegeben, werden alle Warenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI00478 24 MAY 2021

Compat®